



# TensioFlash®

MODELE  
**KD-525E**

## SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ ET PRECISION

Ce tensiomètre électronique de bras vous offre toutes les qualités requises pour une prise de tension dans des conditions optimales.

Le TensioFlash Model KD-525E est doté du système de gonflage **Fuzzy-Logic**, technique de mesure à intelligence Artificielle fiable qui a pour avantage de pouvoir mesurer la totalité de tous types de pouls et de tenir compte des particularités de chaque individu, y compris les pouls atypiques (faibles, forts, irréguliers). Prise de tension rapide, très large écran d'affichage.

Le TensioFlash Model KD-525E est livré avec piles et housse de voyage.

*Simplicité et efficacité!*

### Packaging

Poids Brut : 700 grs  
Box Dim. : 250 x 90 x 159mm  
EAN 13 : 3760165440352

ACL : 4814461



## Autotensiomètre

Automatique de Bras



**FULLY AUTOMATIC**



### Atouts

- Mesure facile et précise de la tension artérielle et du pouls
- Ecran LCD Large pour une Lecture Facile
- Housse de Protection, graphique pour le suivi de mesures quotidiennes

### Spécifications


- SYS mmHg - DIA mmHg - Pulse l/min
- Plage de mesure : 0-300mmHg,
- Pulsations : 30-180/Battements par Minute
- Gonflage par pompe électrique
- Précision Technique : Pression +/-3mmHg
- Pulsations : +/-5% de la valeur mesurée
- Précision clinique : conforme aux exigences de l'EN1060-4

Méthode de mesure	Méthode Oscillométrique
Déflation	Pression relâchée par valve
Durée des piles	> 270 Mesures
T° Fonct. & Humidité	5° - 40 °C / 30 - 85% RH
Stockage T° & Humidité	-20° -65 °C / 10 - 90% RH
Dimensions	100 x140 x 65 mm (l X L x H)
Poids Net	350g (Dispositif avec batteries)
Accessoires fournis	Brassard 22-32cm, Notice, Housse, 4 Piles AA



**TESTÉ CLINIQUEMENT**

Enregistré **afssaps**  
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

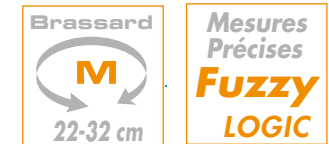

Intelligence Artificielle  
**Fuzzy LOGIC**